

សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៅមន្ទីរពិសោធន៍

ការរៀបចំដើម្បីប្រមូលសំណាក

- សូមអានការណែនាំទាំងអស់ មុនចាប់ផ្តើមតេស្តរបស់អ្នក។
- អ្នកមិនចាំបាច់ផ្អាកការញ៉ាំអាហារ ឬការលេបថ្នាំទេ។
- ការញ៉ាំផ្លែឈើនិងបន្លែ អាចបង្កើនភាពក្រើមត្រូវនៃតេស្ត។
- ពិនិត្យមើលបញ្ជី “មាតិកាសម្ភារ” ដើម្បីប្រាកដថា អ្នកមានសម្ភារគ្រប់គ្រាន់។
- ប្រសិនបើអ្នកមានសម្ភារលាងសម្អាត ឬទឹកលាង នៅក្នុងបង្គន់ ឬបានលាងដៃ សូមយកវាចេញ និងកាត់ទឹកបង្គន់ពីរផង។

ការព្រមាន និងការប្រុងប្រយ័ត្ន

លក្ខខណ្ឌខ្លះអាចធ្វើឲ្យខុសលទ្ធផល អ្នកមិនគួរធ្វើតេស្តទេ ប្រសិនបើ

- កាតធ្វើតេស្តបានហួសថ្ងៃកំណត់ប្រើប្រាស់។
- កញ្ចប់ប្រមូលសំណាកមានការខូចខាត កខ្វក់ ឬហាក់ត្រូវបាន គាស់ឲ្យរើកតាមវិធីណាមួយ។
- អ្នកមានជំងឺឬសង្កត់ ដែលមានឈាមហូរ។
- អ្នកមានឈាមក្នុងទឹកនោម ឬអ្នកឃើញឈាមនៅក្នុងបង្គន់។ នៅក្នុងករណីនេះ សូមទាក់ទងទៅវេជ្ជបណ្ឌិត។
- វាគឺនៅបីថ្ងៃមុន ក្នុងពេល ឬបីថ្ងៃក្រោយមានផ្ទុំ។
- អ្នកមានស្នាមមុត ឬរបួសដែលហូរឈាមនៅលើដៃរបស់អ្នក។
- ទឹកក្នុងបង្គន់របស់អ្នកគឺដូចជាទឹកសមុទ្រ ឬទឹកល្អក់។

គោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់

តេស្ត InSure® ONE™ រកឃើញឈាមដែលកប់នៅក្នុងឈាមរបស់អ្នក។ វត្តមាននៃឈាមអាចជាសញ្ញានៃបញ្ហា ហាត្រពះពោះវៀនផ្នែកខាងក្រោម ដែលគួរធ្វើការព្យាបាល។ សំណាកត្រូវបានប្រមូលយកនៅក្នុងកន្លែងឯកជននៃផ្ទះរបស់អ្នក ហើយបន្ទាប់មកទៀត តេស្តត្រូវធ្វើឡើងនៅមន្ទីរពិសោធន៍ ឬការិយាល័យអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រ។ តេស្ត InSure® ONE™ គឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៅមន្ទីរពិសោធន៍។

ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ IVD

តេស្ត InSure® ONE™ គោរពទៅតាមសេចក្តីណែនាំឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ IVD លេខ 98/79/EC និងមានស្លាកសញ្ញា CE។

វិធីសាស្ត្រ

តេស្ត InSure® ONE™ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីរកមើលការហូរឈាមនៅក្នុងពោះវៀនក្រោម។ ជំងឺចុងពោះវៀន ដូចជាប៉ូលីព និងរលាកពោះវៀនធំ បណ្តាលឲ្យមានការលេចចេញឈាមបន្តិចបន្តួចនៅពោះវៀនផ្នែកខាងក្រោម។ ប្រសិនបើមានឈាមនៅក្នុងឈាមរបស់អ្នក វានឹងចេញពីឈាមទៅក្នុងទឹកនៅបានបង្គន់។ កញ្ចប់ InSure® ONE™ មានសម្ភារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រមូលសំណាកទឹកពីបានបង្គន់ចំនួនពីរសំណាក ចេញពីឈាមតែមួយ ដើម្បីធ្វើតេស្ត ប្រសិនបើមានឈាមនៅក្នុងសំណាក។ ការយកសំណាកគឺសាមញ្ញ ហើយមិនចាំបាច់ប៉ះលាមកទេ និងធ្វើនៅក្នុងកន្លែងឯកជននៃបន្ទប់ទឹករបស់អ្នក។

សាមាសធាតុ

កញ្ចប់តេស្តនេះមិនមានសារធាតុប្រតិកម្មទេ។

សម្ភារនៅក្នុងកញ្ចប់

- របៀបប្រើប្រាស់
- កាតតេស្ត
- កញ្ចប់ប្រាស ក្នុងនោះមានប្រាសពីរ និងកញ្ចប់ដាក់កាតសំណល់ពីរ
- ស្រោមស័ប្ត្រសម្រាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកវិញ
- ទម្រង់ឆ្លើយតបមានស្លាក

ការទុកដាក់ និងការលើកដាក់


កាតតេស្តគួររក្សាទុកនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពបន្ទប់។ ការពារពីកម្ដៅ និងពន្លឺព្រះអាទិត្យ។ ប្រើប្រាស់កញ្ចប់ មុនកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ ដូចមានបោះពុម្ពនៅលើកាតតេស្ត។

ដែនកំណត់នៃទម្រង់ការ

តេស្តនេះរកឃើញឈាមមនុស្សនៅក្នុងឈាម។ អាចមានជំងឺក្រពះពោះវៀន ដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានឈាមនៅក្នុងឈាម។ ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានតេស្ត “វិជ្ជមាន” នោះគ្រូពេទ្យនឹងត្រូវធ្វើតេស្ត និងវាយតម្លៃបន្ថែមទៀត។ តេស្តនេះមិនជំនួសការពិនិត្យរាងកាយ ឬទ្វារធំ ដែលគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកត្រូវធ្វើជាប្រចាំទេ។ លទ្ធផលតេស្ត “អវិជ្ជមាន” មានន័យថា មិនមានឈាមមនុស្សនៅក្នុងសំណាកទេ។ ទោះយ៉ាងណា ស្ថាប័នប្រើប្រាស់ពោះវៀនជាប់ទ្វារធំ រួមមានប៉ូលីព និងជំងឺមហារីកចុងពោះវៀន អាចនាំឲ្យមានឈាមហូរដាច់ៗ ឬមិនមានឈាមហូរទាល់តែសោះ។ លើសពីនេះ ឈាមអាចមានរបាយមិនស្មើគ្នា នៅក្នុងឬនៅលើឈាម ហើយលទ្ធផលតេស្តអាចអវិជ្ជមាន ទោះបីជាមានឈាម ឬមានជំងឺក្រពះពោះវៀនផ្នែកខាងក្រោម។

និមិត្តសញ្ញាដែលបានប្រើប្រាស់

 តំណាងស្របច្បាប់ប្រចាំសហគមន៍អឺរ៉ុប	 ប្រយ័ត្ន សូមមើលរបៀបប្រើប្រាស់
 លេខកូដសម្ភារ	 ក្រុមហ៊ុនផលិត
 ប្រើប្រាស់នៅក្រើម (ផ្តា ខែ ឆ្នាំ)	 ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៅមន្ទីរពិសោធន៍
 ដែនកំណត់នៃសីតុណ្ហភាព 36°F (2°C) - 99°F (37°C)	 ជីវគ្រោះថ្នាក់
 ហាមប្រើឡើងវិញ	 ផលិតផលនេះ មានការគ្របដណ្តប់ដោយប័ណ្ណបញ្ជី
 ស្លាកសញ្ញា CE	 ទុកឲ្យឆ្ងាយពីកម្ដៅ
 មាតិកា	 មិនមែនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ខាងក្នុងទេ ទុកឲ្យឆ្ងាយពីក្មេង



Enterix Inc., A Clinical Genomics Inc. Company
236 Fernwood Ave., Edison NJ 08873 USA



mdi Europa GmbH
Langenhagener Straße 71
D-30855 Langenhagen
Germany



មានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើតេស្ត

សូមអានការណែនាំទាំងអស់ មុនចាប់ផ្តើមតេស្តរបស់អ្នក។




ជំហានទី 1

- យកការណែនាំនេះ តភ្ជាប់ដាក់ និងកាតតេស្ត ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹក។
- កាត់ទឹកបង្គន់ មុន បន្ទាប់មក។




ជំហានទី 2

- ក្រោយពេលបន្ទោបង់ ហាមដាក់ក្រដាសបង្គន់ទៅក្នុងបង្គន់។ ផ្ទុយទៅវិញ ត្រូវប្រើចងកាកសំណល់ពណ៌ខៀវដែលបានផ្តល់ជូន។
- ហាមកាត់ទឹកបង្គន់ ក្រោយពីបន្ទោបង់។

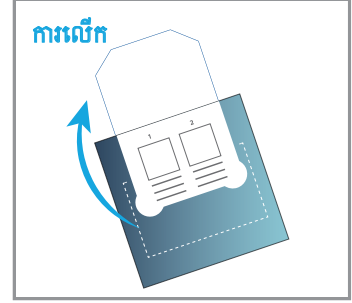

ជំហានទី 3

- លើកសន្ទះដែលមានសរសេរអក្សរថា "LIFT HERE FOR SAMPLE" នៅលើកាតតេស្ត ដើម្បីបើកគម្របពណ៌សដែលមានសម្គាល់លេខ "1" និង "2"។

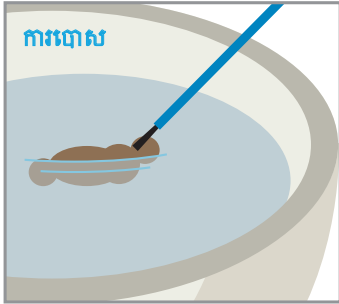

ជំហានទី 4

- ប្រើដក់ពណ៌ខៀវ បោសថ្មីនៅលើផ្ទៃលាមករយៈពេល 5 វិនាទី។
- ប្រសិនបើលាមកដាច់ពីគ្នា អ្នកគ្រាន់តែកូរជុំវិញលាមក។
- យកដក់ចេញពីទឹក ហើយរលាស់តិចៗតែម្តង ដើម្បីមិនឲ្យដោយទឹកច្រើននិងលាមកច្រើនពេក។



ជំហានទី 5

- ឆ្លើយតែទឹកប៉ុណ្ណោះ ដោយប៉ាតថ្មីម្តងលើសរសៃដក់ទៅលើផ្ទៃក្រឡាពណ៌សដែលមានស្លាកសញ្ញា "1" នៅលើកាតតេស្តសម្រាប់រយៈពេល 5 វិនាទី (ស្នាមប្រឡាក់លើក្រឡាអាចកើតមាន)។
- បោះចោលដក់ទៅក្នុងថង់សម្រាប់ដាក់កាកសំណល់ និងបោះចោល។




ជំហានទី 6

- ដោយប្រើដក់ពណ៌ខៀវពីរ អនុវត្តជំហានទី 4 និងធ្វើសំណាកទឹកទីពីរនៅលើកាតតេស្ត ដោយប៉ាតដក់ថ្មីម្តងទៅលើក្រឡាពណ៌សដែលមានដាក់ស្លាកលេខ "2" ប្រហែល 5 វិនាទី។
- បោះចោលដក់ទៅក្នុងថង់សម្រាប់ដាក់កាកសំណល់មួយទៀត និងបោះចោលទៅក្នុងថង់សំរាមរបស់អ្នក។




ជំហានទី 7

- សរសេរឈ្មោះរបស់អ្នក ដាក់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត និងកាលបរិច្ឆេទប្រមូលសំណាក នៅលើស្លាកដែលអាចដកចេញបាន។
- កុំភ្លេចដាក់កាលបរិច្ឆេទប្រមូលសំណាក។
- បកស្លាកចេញ និងប្រើវាដើម្បីបិទបន្ទះឲ្យជិតឡើងវិញ។

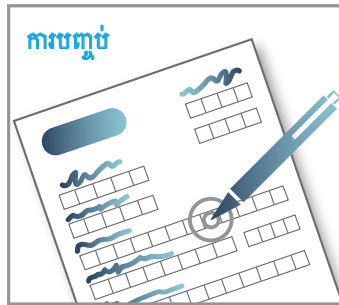

ជំហានទី 8

- បំពេញទម្រង់ឆ្លើយតប។
- ដាក់កាតតេស្ត និងទម្រង់ឆ្លើយតបនៅក្នុងស្រោមសំបុត្រប្រៃសណីយ៍ បង់ប្រាក់ដែលបានផ្តល់ជូន។
- ប្រសិនបើអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្ររបស់អ្នក ឬមន្ទីរពិសោធន៍បានផ្តល់ទម្រង់ស្នើសុំធ្វើតេស្តដែលបានសរសេរទុកជាមុនមកអ្នក សូមដាក់ទម្រង់នោះមកជាមួយនៅក្នុងស្រោមសំបុត្រឆ្លើយតបផងដែរ។

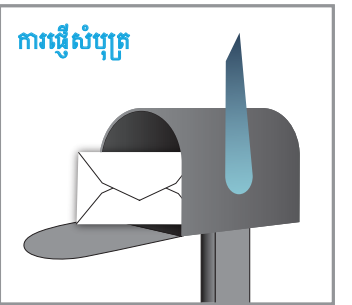

ជំហានទី 9

- ផ្ញើសំបុត្រមកវិញតាមរយៈដោយប្រើស្រោមសំបុត្រដែលបានផ្តល់ជូន។
- កាតតេស្តត្រូវផ្ញើមកមន្ទីរពិសោធន៍ដែលបានបញ្ជាក់ ឬប្រគល់ជូនអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រឲ្យបានតាមវិធានដែលអាចធ្វើបាន ក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃ ក្រោយពេលបានប្រមូលសំណាក។
- លទ្ធផលនឹងត្រូវផ្ញើទៅវិញតាមរយៈអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រ។